


# Bruger Manual FlexStep

BRUGER MANUAL – FLEXSTEP – DK VERSION 2,4



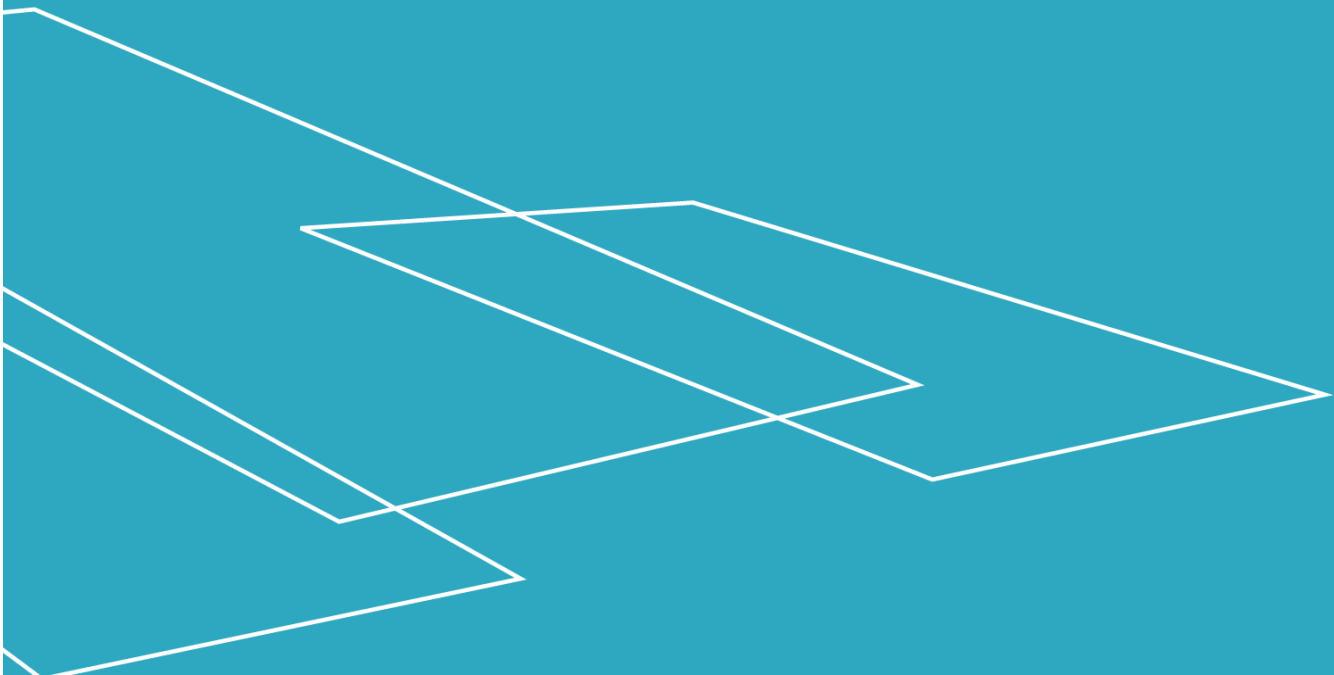

## Indhold

I	
1.	Forord ..... 3
2.	EF-overensstemmelseserklæring ..... 4
3.	Typecertifikat ..... 5
4.	Brugsbetingelser ..... 6
5.	Tekniske specifikationer ..... 7
6.	Sikkerhedsanvisninger ..... 8
6.1	Personssikkerhed ..... 9
6.2	Håndtering ..... 11
7.	Funktionsbeskrivelse ..... 12
8.	Montage ..... 12
9.	Opstart ..... 12
10.	Betjening ..... 13
11.	Drift ..... 15
12.	Vedligeholdelse ..... 16
13.	Sådan parrer du sender og modtager ..... 17
14.	Installation og overdragelse ..... 18
15.	Vedligeholdelsestjekliste ..... 19
16.	Service logbog ..... 20
17.	Reserve dele ..... 21
18.	Demontage ..... 22
19.	Bortskaffelse ..... 22
20.	Reklamationsret ..... 22



## I. Forord

Tillykke med din nye kørestolslift.

Dette er en original brugsanvisning til din nye FlexStep.

Det er vigtigt, at du gennemlæser denne manual, før maskinen tages i brug.

Opstilling og installation SKAL foretages af en af Liftup uddannet servicetekniker, for at sikre korrekt montage. Evt. forkert montage kan forårsage utilsigtede faremomenter.

FlexStep er en elegant kombination af en normal trappe og en kørestolslift, der let og elegant giver kørestolsbrugere og gangbesværede adgang imellem to niveauer.

Maskinen betjenes enkelt via betjeningspaneler monteret på væggen, eller via en elegant fjernbetjening.



## 2. EF-overensstemmelseserklæring

### Maskindirektivet 2006/42/EF

**Fabrikant:** Liftup A/S  
**Adresse:** Hagensvej 21, DK-9530 Støvring  
**Telefon nr.:** +45 9686 3020

erklærer hermed, at:

**Udstyr:** **FlexStep**  
 Kombinations trappelift til kørestolsbrugere og gangbesværede

**År:** 2006

er i overensstemmelse med **Maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav:**

Ved vurderingen er anvendt:

ISO 9386- 1: 2000 Power operated lifting platforms.

er i overensstemmelse med **EMC-direktivet 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.**

Direktør  
 \_\_\_\_\_  
 Titel

Flemming Eriksen  
 \_\_\_\_\_  
 Navn

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring  
 \_\_\_\_\_  
 Sted

01-12-2009  
 \_\_\_\_\_  
 Dato

\_\_\_\_\_  
 Underskrift



### 3. Typecertifikat





## 4. Brugsbetingelser


FlexStep er udelukkende til brug for kørestolsbrugere eller gangbesværede personer. Max. belastning er 250 kg. eller max. 2 personer **jævnt fordelt på platformen.**

Denne brugervejledning skal gennemlæses grundigt før ibrugtagning.

Platformen må IKKE bruges til varetransport, der må ikke køres paller med gods eller anden form for svær last ind på den.

Ejeren af maskinen er forpligtet til at vedligeholde den iht. Vedligeholdelsesvejledningen i afsnit 12.

## 5. Tekniske specifikationer

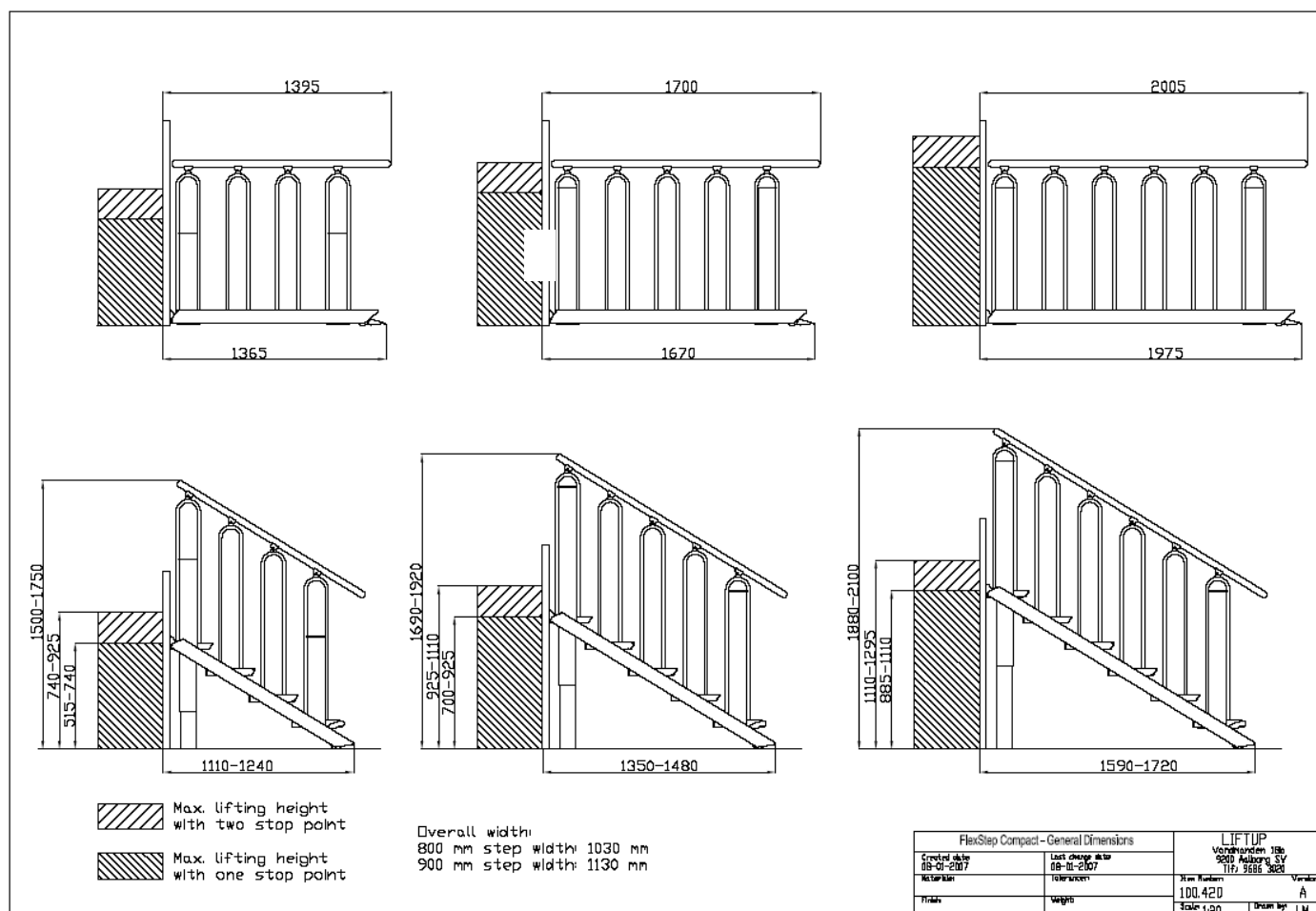

### Tekniske specifikationer:

El-forsyning: 230V/50 Hz 10A.

Max. last: 250kg eller 2 personer


Platform str.: B 700/800/900/1000 x L 900 - 1800 mm (indvendige mål)  
B 920 – 1220 x L 1095 – 2010 mm (udvendige mål)

Egenvægt: ca. 120 kg

Støjniveau: < 70 db.

Hastighed: Op til 50 mm / sek.

Duty Cycle: 2 min. / 18 min.

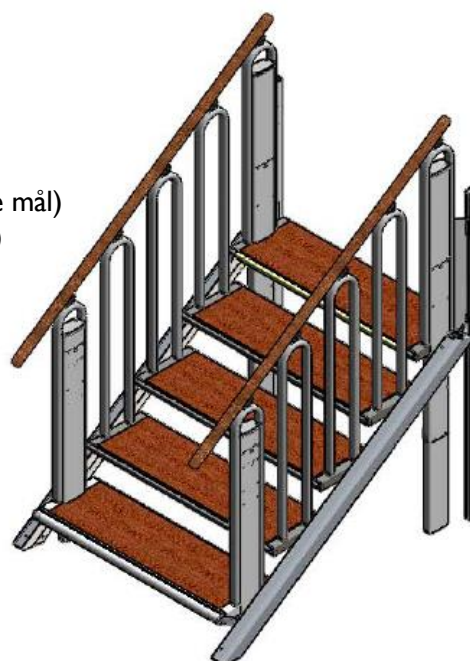



## 6. Sikkerhedsanvisninger



### Installation og vedligehold.

Forsøg ikke selv at installere eller vedligeholde Deres FlexStep. Dette SKAL foretages af en autoriseret\* servicetekniker.

Fjern IKKE beskyttelsesplader eller sikkerhedsplader, da dette kan bevirke, at din maskine forårsager personskade.

### Utilsigtede bevægelser af FlexStep.

Såfremt der under anvendelsen af din FlexStep opstår handlinger eller bevægelser, der ikke er beskrevet i denne manual, skal enheden standses og teknisk assistance tilkaldes.

Såfremt din FlexStep ikke bevæger sig i en plan bevægelse som platform, skal denne kalibreres ved at køre platformen ned til gulvniveau. Hvis problemet fortsætter, tilkald teknisk assistance.

### Maskinens bevægelse.

Det frie rum under maskinen skal holdes fri for alle emner/objekter, der kan forhindre dens bevægelse i nedadgående retning. I modsat fald kan maskinen ikke bevæges til det nederste niveau og derved ikke anvendes som kørestolslift.

Hvis et emne/objekt forhindrer maskinens bevægelse i nedadgående retning, vil den standse og afgive en akustisk alarm. Emnet eller objektet skal fjernes, før maskinen igen kan anvendes.

### Undgå personskade.

For at undgå personskade er det IKKE tilladt, at anvende FlexStep, når nogen eller noget er i fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller lignende. Det skal fra brugeren/operatørens side videst muligt sikres, at maskinens bevægelse kan ske uden at bringe nogen eller noget i fare.

Vær ekstra opmærksom, når der er mindre børn og handikappede på eller nær maskinen, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige konsekvenser af dens bevægelser.

### Overbelastning af maskinen.

For at undgå materiel skade i forbindelse med overbelastning (max. 250 kg jævnt fordelt) er FlexStep udstyret med en overbelastningssikring, der ved overbelastning stopper maskinen, og udløser en akustisk alarm. I tilfælde af overbelastning, kørs da ned for at komme af.

\* Har gennemgået produkt og servicekursus af Liftup

### Advarsel

Selv om maskinen er udstyret med diverse sikkerhedsforanstaltninger, så brug den aldrig, hvis der opholder sig personer eller dyr i nærheden, således der ikke opstår fare for klemning.

### Lad aldrig børn lege med maskinen.



## 6.1 Personssikkerhed

FlexStep er udstyret med forskellige sikkerhedsanordninger, der sikrer, at brugeren og andre personer ikke kommer til skade ved brug af maskinen.


### Klemsikring.

Under hele maskinen er der monteret et antal trykplader (klemsikring), der bliver aktiveret, hvis noget skulle komme i klemme nedenunder. Når klemsikringen bliver aktiveret, stopper den og kører ca. 2 cm retur, samtidig med, at der lyder en akustisk alarm (fortsætter, indtil knappen slippes).

Hvis klemsikringen bliver aktiveret, slippes betjeningsknappen..

Eventuelle genstande under maskinen fjernes, og der kan atter køres til position "lift nede" eller trappe. (Kør evt. lidt op for lettere at kunne fjerne genstande undermaskinen).

OBS. Vær opmærksom på, at ved udendørs installationer kan blade, grene og sne påvirke klemsikringen, og derfor bør det jævnligt efterses, at der ikke er noget under maskinen. Det anbefales ved udendørs installationer at køre ned efter brug, for at undgå, at uønskede genstande ryger ind under maskinen.

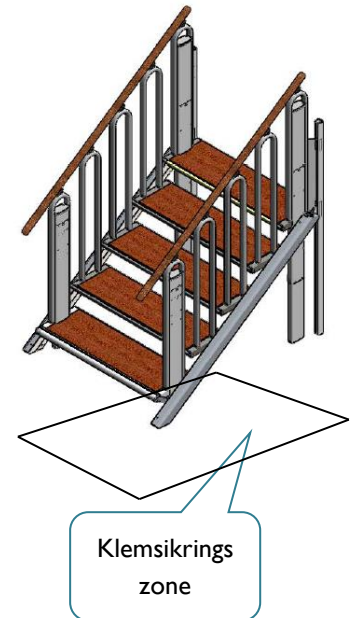

### Undgå personskade.

- FlexStep må IKKE bevæges fra trappe til platform, når der er personer eller objekter på trappen.
- For at undgå personskade er det IKKE tilladt at anvende FlexStep, når nogen eller noget er i fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller lignende.
- Det er vigtigt, at brugeren/operatøren sikrer sig, at FlexStep's bevægelse kan ske uden at bringe nogen eller noget i fare.
- Vær ekstra opmærksom, når der er mindre børn og handikappede på eller nær trappen/platformen, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige konsekvenser af trappens/platformens bevægelser.

### Infrarød klemsikring:

Infrarøde sensorer er monteret mellem trinpladerne for at undgå klemning mellem trinene. Hvis IR sensorerne brydes, når FlexStep bevæges fra trappe til platform eller modsat, vil bevægelsen standse og der afgives en akustisk alarm.



*Infrarøde sensorer forhindrer klemning mellem trin.*

**Afkørselssikring:**

Når maskinen køres til ”lift oppe”, vil rampen først køre op og låse, inden maskinen begynder at køre. Rampen virker nu som afkørselssikkerhed.

Når maskinen køres helt ned, vil rampen automatisk køre ned, og virke som op/nedkørselsrampe.

Hvis maskinen er leveret med dør eller sikkerhedsbom på øvre niveau\*, vil disse lukke og låse, før maskinen begynder at bevæge sig.

Døren vil altid være lukket og låst, når maskinen er væk fra øverste niveau. Rampen er oppe, når maskinen er væk fra det nederste niveau.



Rampen hæves og låses



Rampen sænkes

\* Ekstraudstyr



## 6,2 Håndtering

Maskinen bliver normalt leveret af din forhandler, som også sørger for installationen. Forsøg ikke at flytte maskinen med håndkraft, da det kan give varige personskader. Produktet skal flyttes og håndteres med dertil indrettet løftemateriel (palleløfter, rulleplade eller lign.).

maskinen må ikke udsættes for kraftige stød/bump, da det kan gå ud over funktionaliteten.

Den medfølgende fjernbetjening\* skal opbevares tørt, og må ikke udsættes for kraftige slag, ved f.eks. et kaste med den. Rengøring må kun foretages med en hårdt opvredet klud.

\* Ekstraudstyr



## 7. Funktionsbeskrivelse

Maskinen er en såkaldt "dødemandsbetjent" lift, dvs. at trykknapperne skal holdes inde under hele kørslen.

Den fungerer i sin enkelthed ved, at brugeren tilkalder maskinen med en af trykknapperne på væggen, eller med den medfølgende fjernbetjening\*.

Når brugeren er på platformen, betjenes denne fra panelet i siden, hvor man kan vælge at blive transporteret hhv. til øvre eller nedre niveau.

## 8. Montage

Installation af maskinen er foretaget af en autoriseret servicetekniker.

Forsøg ikke at flytte eller afinstallere Deres FlexStep, samt evt. reparere den. Dette SKAL foretages af en autoriseret servicetekniker.

Ved forkert montage kan der opstå en øget sikkerhedsrisiko for brugerne. Liftup fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt montage og installation ikke er udført af en autoriseret servicetekniker.

For yderligere information eller materiale vedr. montage kontakt Liftup +45 9686 3020, support@liftup.dk.

## 9. Opstart

Maskinens styreenhed skal altid være tilkoblet en 230V stikkontakt og være tændt. Normalt er FlexStep altid i "stand by mode", dvs. den er klar til brug, så snart der bliver trykket på en af betjeningstasterne.

Hvis nødstop er trykket ind, skal dette udløses, før maskinen kan tages i brug (se mere i afsnit 10 vedr. betjening)

## 10. Betjening

### Den daglige anvendelse.

FlexStep betjenes ved hjælp af de to betjeningspaneler hhv. på øvre og nedre niveau, et joystick på platformens gelænder eller via fjernbetjeningen\*. Fjernbetjeningen erstatter de to trykknappaneler.



Joystick på platformens gelænder



Kalde til trappe




Kalde til platform



Fjernbetjening

\* Ekstraudstyr

### Betjening af FlexStep fra det ØVERSTE niveau.

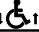For at kalde trappen til platform til ØVERSTE niveau skal der trykkes/holdes på  tasten. Trappen løfter rampen til en afrulningsbeskyttelse og denne låses i opslået position (Fig. 1). Trappen bevæger sig ned til en platform ved NEDERSTE niveau, hvorefter den hæves som platform til ØVERSTE niveau (Fig. 2). Kør forsigtigt ind på platformen (Kørestolen låses/bremser), hold joysticket nede hvorved platformen sænkes til det NEDERSTE niveau. Kør forsigtigt væk fra platformen. (Fig. 3)



Rampen hæves og låses




Kør ind på platformen



Kør væk fra platformen

## Betjening af FlexStep fra det NEDERSTE niveau


For at kalde trappen til platform til NEDERSTE niveau skal der trykkes/holdes på  tasten. Trappen løfter rampen til en afrulningsbeskyttelse og denne låses i opslået position (Fig. 1). Trappen bevæger sig ned til en platform ved NEDERSTE niveau, hvorefter rampen sænkes til en opkørselsrampe. (Fig. 4). Kør forsigtigt ind på platformen (kørestol skal låses/bremSES) (Fig. 5). Hold joysticket opad og platformen bevæges op til det ØVERSTE niveau efter rampen er hævet til en afrulningsbeskyttelse. Kør forsigtigt væk fra platformen (Fig. 6).



Rampen sænkes



Kør ind på platformen

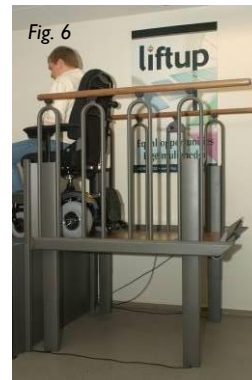

Kør væk fra platformen


## Betjening af FlexStep på platformen

Bevægelse af FlexStep som kørestolslift sker ved hjælp af joysticket monteret på trappens gelænder.

- For at køre platformen op, bevæges joysticket op, og holdes oppe indtil maskinen standser, og evt. dør eller bom er kørt væk.
- For at køre platformen ned, bevæges joysticket nedad, og holdes nede indtil maskinen standser, og evt. dør eller bom er kørt væk.

## Autoretur



Ved at aktivere  tasten kan FlexStep bevæges til sin normale position som trappe. Hvis ingen betjeningskaster eller IR-sensorer har været aktiveret i ca. 60 sekunder, vil FlexStep automatisk returnere til sin normale position som trappe. (Der afgives akustisk alarm under denne operation). Denne funktion kan kobles fra, hvis man ikke ønsker, at maskinen automatisk går tilbage til trappe.

## Nødstop

Hvis maskinen foretager en uønsket bevægelse, eller hvis den skal standes med henblik på at undgå faremomenter, tryk da på NØDSTOP.

For at løse nødstopet drejes knappen med uret og systemet er klar til brug.





## II. Drift

Under normale driftsforhold skal maskinen altid være tilsluttet 230V. Det er meget vigtigt, at strømmen ikke frakobles eller slukkes, idet længerevarende strøm-afbrydelse (1-2 uger) kan resultere i batterisvigt, og dermed driftstop. I tilfælde af strømsvigt, vil der lyde en akustisk alarm.

### Batteri backup

I tilfælde af strømsvigt (230V), eller hvis der på anden måde bliver afbrudt for strømmen til styringen, slår styringen automatisk over til backup-tilstand. Dette betyder at systemet fortsat vil fungere helt normalt, idet batteri-backuppen tager over. Som en advarsel for strømsvigt vil der lyde en bippende alarmtone. Så snart strømmen igen bliver tilkoblet, vil alarmen ophøre. Systemet kører nu igen i normaldrift. Hvis det ikke er muligt straks at tilkoble strømmen, og du ønsker at stoppe alarmtonen, tryk da på nødstop. (vær opmærksom på, at systemet da vil kræve en kalibrering, se nedenstående)



**Vigtigt!** Hvis både 230V forsyningen og nødstop har været frakoblet på samme tid, går systemet automatisk over i "sikkerheds tilstand", og systemet skal herefter kalibreres. (se nedenstående).

### Kalibrering efter nødstop/strømdufald

Såfremt nødstop har været aktiveret og strømforsyningen afbrudt, eller hvis systemet registrerer anden form for uregelmæssigheder, skal maskinen kalibreres. Maskinen går automatisk i en speciel "sikkerhedstilstand", som kun tillader den at køre nedad med en meget lav hastighed.

### Sikkerheds tilstand

Din FlexStep skal køres ned til platform-position i nederste niveau og kalibreres, før den kan anvendes normalt igen. Dette gøres ved at kalde til platform på kaldestationen (eller fjernbetjeningen). Kald til platform fra øvre niveau kræver, at der trykkes igen efter maskinen er blevet kalibreret. Der kan ikke kaldes til trappe i sikkerheds tilstand. I specielle tilfælde, hvor maskinen evt. har kørt lidt skævt, vil FlexStep af sikkerhedsmæssige grunde stoppe efter ca. 10 cm kørsel, tryk da nødstop og løsn det igen, hvorefter nedknappen igen aktiveres. Denne procedure fortsættes indtil maskinen er helt nede og rampen er kørt ned. Når rampen er kørt ned og alle 4 ben er i bund er systemet kalibreret, og vil nu fungere normalt igen.



**Vigtigt!** Hvis du observerer, at maskinen ikke kører som forventet, eller stopper igen efter få centimeter, kan der være opstået tekniske problemer, der kræver udbedring af teknisk kyndigt personale. Kontakt din forhandler for yderligere hjælp.





## 12. Vedligeholdelse

Den almene rengøring må kun foretages med en hårdt opvredet klud. Der må IKKE anvendes højtryksrensere eller spules direkte på maskinen med vandslange. Saltning mm

Evt. olierede træbelægninger skal jævnligt (ca. hver 3. måned) vedligeholdelse med træolie, for at sikre træets levetid.

Kontroller jævnligt under maskinen for evt. blade, grene eller andre utilsigtede emner, og fjern disse for at sikre dens frie bevægelse.

Den mekaniske vedligeholdelse af maskinen skal normalt kun foretages i forbindelse med de regelmæssige serviceeftersyn, som skal foretages af en autoriseret servicetekniker.

Skulle der opstå utilsigtede fejl eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at få udbedret fejlen.

### Fjernbetjening (tilbehør)

I fjernbetjenings håndsættet er der monteret to batterier, for at sikre stabil funktion skal batterierne skiftes hvert halve år. For at skifte batterierne gør som følger:

1. Løsn skruen bag på fjernbetjeningen.
2. Fjern bagpanelet.
3. Løsn skruen der holder batterierne.
4. Udskift batterierne.
5. Monter bagpanelet igen og test.




Hvis strømmen har været fjernet fra håndsættet eller modtageren i længere tid, kan det være nødvendigt at kalibrere systemet (parre de to enheder) Gør som beskrevet i afsnit 13.



## 13. Sådan parrer du sender og modtager

Anvendes kun hvis der er mere end en fjernbetjent lift installeret indenfor fjernbetjeningens dæknings område.

1. Kontroller at kablerne i modtageren er forbundet korrekt til den sorte kontrolboks.
  - a. Nedre niveau
  - b. Øvre niveau
2. Sørg for at der er strøm på systemet og det er tændt.
3. Tryk på OP(↑) og NED (↓) knapperne på håndsettet på samme tid, og hold dem inde i ca. 5 sekunder, indtil kontrollederen i håndsettet begynder med at blinke langsomt. Håndsettet er nu i installeringsmode i 2 min.
4. Indenfor de 2 min. skal strømmen til den maskine, som ønskes forbundet med håndsettet, afbrydes og tilsluttes igen. Dette gøres ved at trykke den røde nødstopknap på maskinen ind, og frigøre den igen ved at dreje knappen.
5. Når kontrollederen på håndsettet stopper med at blinke, er den forbundet med maskinen.
6. Prøv systemet af for at sikre at parringen er gennemført korrekt, hvis ikke gentag punkt 1-5.

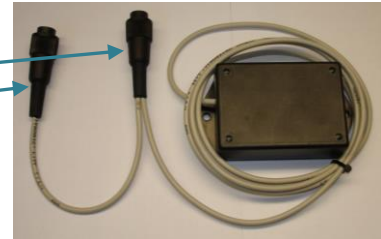

### Sådan nulstiller du sender og modtager:

For at nulstille et håndset, så det ikke længere er forbundet til én bestemt maskine, skal nedenstående punkter følges:

1. Tryk på OP(↑) og NED (↓) knapperne på håndsettet på samme tid, og hold dem inde i ca. 5 sekunder, indtil kontrollederen i håndsettet begynder med at blinke langsomt. Håndsettet er nu i installeringsmode i 2 min.
2. indenfor de 2 min. skal følgende sekvens udføres:

Tryk på: OP(↑), OP(↑), NED (↓), NED (↓), OP(↑), NED (↓), OP(↑), NED (↓)

3. Når kontrollederen begynder at blinke hurtigt, er håndsettet ikke længere forbundet til en bestemt maskine.



## 14. Installation og overdragelse

Skemaet skal udfyldes i forbindelse med installation.

Eksempel:



### Installation og overdragelse

Skemaets skal udfyldes i forbindelse med installation.



Kunde:	Produkt:
Adresse:	Produkt Type Nr.:
Post Nr.:	Serie Nr.:
Telefon Nr.:	Installation dato:
Kundens accept af installation:	Installeret af:

#### Checkliste:

Nr.	Beskrivelse	Gennemgået	Evt. bemærkninger
1	Afprøvningsammen med kunden	<input type="checkbox"/>	
2	Nødstop	<input type="checkbox"/>	
3	Safety mode	<input type="checkbox"/>	
4	Gennemgang af manualen	<input type="checkbox"/>	
5	Vise klemsikring inkl. alarm	<input type="checkbox"/>	
6	Overlast.	<input type="checkbox"/>	
7	Rampe/låge funktion (switch)	<input type="checkbox"/>	
8	230V til styringen (må ikke slukkes)	<input type="checkbox"/>	
9	Evt. udskiftning af batteri i fjernbetjening.	<input type="checkbox"/>	
10	Ved udendørs lift: Instruks om behandling i hårdt miljø (minus saltning o. lign.)	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	

Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk





## 16. Service logbog

Skemaet (som nedenstående eksempel) skal udfyldes efter hvert eftersyn. Logbogen skal gemmes ved maskinen.

Eksempel:



### Service logbog

Skemaets skal udfyldes efter hvert eftersyn.

Kunde:	Produkt:
Adresse:	Produkt Type Nr.:
Post Nr.:	Serie Nr.:

Telefon Nr.:	Installation dato:
Kontakt Person:	Telefon Nr.:
Installations fakta:	Installeret af:
Lift:	2 Stop:
IN:	Out:
	Stairs Timeout:

Nr.	Dato:	Bemærkninger.	Underskrift.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Danmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk



## 17. Reservedele

Der skal til enhver tid anvendes originale reservedele. Udskiftning må kun ske af certificerede serviceteknikere.

Anvendes der andre reservedele end de foreskrevne, bortfalder garantien, og Liftup fraskriver sig samtidig ethvert ansvar vedr. produktets sikkerhed.

Part no.	Description
I01175	Spare parts bundle - dealer
I00255	Mounting kit for steps
I00298	Ramp_lock suspension - Compact
I00328	Plate for Lifting Column
I00336	DC motor for Ramp - Compact
I00338	Micro Switch - Safety system - V4L IP67
I00339	Emergency Stop Button
I00360	IR Safety termination board
I00361	Mainboard - CP & EL
I00363	Programming cable incl. software – Compact/EasyLift
I00409	Micromatch Cable for IR-print
I00410	SUB15 M/F extension cable
I00413	Spring for ramp lock.
I00418	Joystick w/ Rubber – 30 mm
I00419	Actuator - M/F extension cable
I00425	SUB15-7/7 Spiral Cable
I00426	DC Motor for Safety Barrier
I00429	Pushbutton - Lift
I00430	Pushbutton - Stairs
I00433	Micromatch 6-pin connector
I00455	Cable for DL4
I00487	DL4 for Compact, collected + extended
I00582	Actuator internal fittings (DB4)
I01131	Actuator sleeve valves, set
I01157	Cable with 4-pole DIN plug, 10m



## 18. Demontage

For at sikre korrekt demontage, for evt. genbrug ved anden installation, anbefales det at bruge en autoriseret servicetekniker. Kontakt din forhandler for hjælp til demontage.

Vær opmærksom på at der kan opstå væltningsfare, når FlexStep frigøres fra bygningen.

## 19. Bortskaffelse

Det er ejerens pligt at bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tids gældende regler. Vær specielt opmærksom på, at der er monteret batterier i styreenheden, som skal bortskaffes separat.

Kontakt evt. din forhandler for hjælp til bortskaffelse.

## 20. Reklamationsret

Reklamationsretten gælder i henhold til de til enhver tid gældende betingelser (Se mere herom i Liftups salgs- og leveringsbetingelser).

Fravælger kunden de foreskrevne serviceeftersyn, fraskriver Liftup sig ansvar for produktets sikkerhed. Det er altid kundens ansvar at sørge for, at liften er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

**God fornøjelse med Deres nye FlexStep!**

**Mvh. Liftup**